

PiezoWave^{2T}Fabricado por Richard Wolf,
distribuido por Elvation.

Ondas de choque piezo La gama completa

Una terapia exitosa
empieza con la
tecnología adecuada.

**Elvation[®]****RICHARD
WOLF** 

PiezoWave^{2T}



**Más flexibilidad.
Más opciones.**

Su sistema.

El PiezoWave^{2T}, con fuentes terapéuticas seleccionables individualmente, le permite adaptar su terapia de ondas de choque y personalizarla a su medida y a la de su consulta. Puede elegir la gama estándar o centrarse en áreas de tratamiento específicas: la configuración adecuada del sistema garantiza aplicaciones precisas para cada indicación.

Este folleto muestra las opciones disponibles para que usted decida cuál se adapta a sus necesidades.

Contenido.

Introducción

pág. 3

Comparación de las gamas

págs. 4-6

Resumen de fuentes terapéuticas

págs. 7-9

Ventajas de las ondas de choque piezo

págs. 10-13

Interfaz de usuario avanzada

pág. 14

Elvation Hub

pág. 15

Ejemplos de configuración

págs. 16-19

ESWT en medicina regenerativa

Un tratamiento idealmente sin efectos secundarios y no invasivo.



Este ha sido siempre un objetivo fundamental de la medicina y, desde hace tiempo, también de Richard Wolf GmbH y ELvation Medical GmbH. Los estudios de las últimas décadas han confirmado que la terapia de ondas de choque extracorpórea focalizada (ESWT) cumple estos criterios de tratamiento en diversos síndromes.

Las ondas de choque son ondas mecánico-acústicas breves y de alta energía que se transforman en señales bioquímicas en el tejido diana afectado, iniciando una compleja cascada de reacciones celulares y moleculares (lo que se conoce como mecanotransducción). Entre estas reacciones se encuentran la estimulación de la microcirculación y la liberación de la «sustancia P» y de monóxido de nitrógeno (NO), lo que produce vasodilatación, aumento de la actividad metabólica celular, angiogénesis y efectos moduladores de la inflamación. Además, se liberan diversos factores de crecimiento y se activan la lubricina y las células madre mesenquimales. La ESWT favorece la reparación del tejido dañado, apoya la regeneración y contribuye a la curación completa del tejido.

Confíe en el pionero.

Con más de 40 años de experiencia en ondas de choque piezoeléctricas, Richard Wolf GmbH y ELvation Medical GmbH han desarrollado soluciones de alta calidad para lograr resultados terapéuticos sostenibles y exitosos.

Sus ventajas con el PiezoWave^{2T}

Tecnología práctica:
calidad y manejo sin concesiones.

- ▶ El enfoque terapéutico adecuado para cada indicación
- ▶ Direct Focusing: el método más suave y preciso para generar ondas de choque
- ▶ Profundidad de penetración ajustable de forma escalonada
- ▶ Longevidad única
- ▶ Relación frecuencia/densidad de flujo de energía estable
- ▶ Mantenimiento excepcionalmente bajo
- ▶ Elvation Hub: acceso a la información más reciente sobre ajustes y experiencias de uso, siempre y en cualquier lugar
- ▶ T-Mode: un concepto de tratamiento patentado

La gama BASIC

Para todas las fuentes terapéuticas de una capa



- 1 Elvation Hub: le ayuda a tomar decisiones para encontrar los parámetros que necesita. Le permite acceder a ajustes y experiencias de usuarios en cualquier lugar y momento
- 2 Soporte integrado para fuentes terapéuticas
- 3 El soporte para tablet mantiene su iPad siempre a la vista durante las sesiones de tratamiento. El iPad es opcional
- 4 T-Mode: un concepto de tratamiento con distintos modos de frecuencia, desarrollado y patentado especialmente por Richard Wolf
- 5 Conector de alta tensión con reconocimiento plug-and-play de la fuente terapéutica
- 6 Generador de alta tensión para todas las fuentes terapéuticas de una capa. Silencioso en modo de espera
- 7 Bandeja de almacenamiento con fijación para distintos tipos de almohadillas de gel
- 8 La pantalla inclinada permite leer el contenido sentado o de pie
- 9 Barra para desplazar fácilmente el PW^{2T} y colgar toallas de papel
- 10 El compartimento inclinado para el gel garantiza un acceso fácil al frasco



- 11 Ruedas grandes de rodadura suave con protección ESD



Los modelos BASIC estándar incluyen un carro de equipo de alta calidad. Opcionalmente, existe una versión sencilla que puede consultar mediante este código QR.

La gama MULTIUSE

Lista para todas las fuentes terapéuticas de una y dos capas

La gama UNLIMITED

El sistema para cada opción



La gama UNLIMITED se desarrolló para grandes consultas y hospitales de todas las especialidades que ofrecen tratamiento con ESWT.

La unidad de control y el carro de equipo son los mismos que en la gama MULTIUSE. La gama UNLIMITED incluye las fuentes terapéuticas de una capa F10G4 y F10G10 y las de doble capa FBL10x5G2 y FB10G6.

- 12 Soporte compatible para dos fuentes terapéuticas adicionales.
- 13 Generador de alta tensión de alto rendimiento para fuentes de una y dos capas. Silencioso en modo de espera
- 14 2 estantes con fijación para distintos tipos de almohadillas de gel
- 15 Pedal opcional para controlar los niveles de intensidad y disparar la onda de choque

Resumen de características

Característica	Basic	MultiUse	Unlimited
Soporte integrado para fuentes terapéuticas	✓	✓	✓
Conector de AT de alta calidad con reconocimiento plug-and-play	✓	✓	✓
Generador de alta tensión para todas las fuentes terapéuticas de una capa	✓	✓	✓
Estante para almohadillas de gel	✓	✓	✓
Soporte para tablet	✓	✓	✓
T-Mode	✓	✓	✓
Pantalla inclinada	✓	✓	✓
Barra para desplazar el PiezoWave ^{2T}	✓	✓	✓
Compartimento inclinado para el gel	✓	✓	✓
Ruedas grandes con protección ESD	✓	✓	✓
Soporte compatible para dos fuentes terapéuticas adicionales		✓	✓
Generador de alta tensión de alto rendimiento para todas las fuentes terapéuticas de una y dos capas		✓	✓
Bandeja adicional para almohadillas de gel (2 estantes)		✓	✓
Pedal		✓	✓
Fuente terapéutica F10G4			✓
Fuente terapéutica F10G10			✓
Fuente terapéutica FB10G6			✓
Fuente terapéutica FBL10x5G2			✓
Tablet	opcional	opcional	opcional
Ecógrafo portátil	opcional	opcional	opcional



Solicite una consulta gratuita

Descubra qué solución es la mejor para usted.



Asesoramiento personal:

+49 (0) 7231 – 56 36 56

Use nuestro formulario de contacto o el chat en vivo:

www.elvation.de/kontakt/

Fuentes terapéuticas PiezoWave^{2T}

Alta energía, tan variada como las necesidades de sus pacientes.
Todas las fuentes terapéuticas, de libre elección.

A medida que ha aumentado el número de indicaciones de la terapia de ondas de choque, también se han ampliado las propiedades físicas requeridas de las zonas focales, especialmente en cuanto a profundidad de penetración, intensidad, forma y volumen.

Richard Wolf GmbH y ELvation Medical GmbH se han propuesto desarrollar fuentes terapéuticas óptimas y específicas para cada indicación, con zonas focales ajustables que permiten un tratamiento eficaz y personalizado.



Fuentes terapéuticas de una capa: las todoterreno precisas

Fuente terapéutica F7G3



Ligera y manejable

EFD
MAX

0,403 mJ/mm²



Profundidad de penetración / zona focal central

central

0 - 30 mm

5 MPa*

20 - 40 mm



Indicado para:

Trastornos musculoesqueléticos:

- estructuras superficiales pequeñas (p. ej., mano, hombro, pie, tobillo)
- estructuras puntiformes con superficies de contacto limitadas (p. ej., epicóndilo del húmero, tuberosidad de la tibia)

Urología:

- estructuras superficiales claramente delimitadas (enfermedad de Peyronie)

Fuente terapéutica F10G4



El todoterreno con un rendimiento excepcional

EFD
MAX

0,822 mJ/mm²



Profundidad de penetración / zona focal central

central

5 - 40 mm

5 MPa*

14 - 66 mm



Indicado para:

Trastornos musculoesqueléticos:

- versátil, para todas las patologías que requieren una profundidad de penetración de entre 5 y 40 mm en la zona focal central

Urología:

- estructuras claramente delimitadas que requieren alta intensidad (enfermedad de Peyronie)

Fuente terapéutica F10G10



Gran profundidad de penetración con zona focal alargada

EFD
MAX

0,323 mJ/mm²



Profundidad de penetración / zona focal central

central

10 - 100 mm

5 MPa*

28 - 172 mm



Indicado para:

Trastornos musculoesqueléticos:

- puntos gatillo profundos en cadera y glúteos, p. ej., músculo piriforme, cuadrado lumbar
- pacientes con obesidad

Urología:

- estructuras profundas, p. ej., puntos gatillo en la musculatura del suelo pélvico afectada por SDPC

*Nivel de intensidad máx.

Fuentes terapéuticas de doble capa: las especialistas potentes

Fuente terapéutica FB10G6

★ Alto rendimiento gracias a la tecnología patentada de doble capa

EFD
MAX 0,702 mJ/mm²

↔ Profundidad de penetración / zona focal central

central 0 - 60 mm

5 MPa* 21 - 99 mm



Indicado para:

Trastornos musculoesqueléticos:

- grandes áreas, p. ej., calcificaciones extensas, inserciones tendinosas amplias y cobertura del foco de fractura en la pseudoartrosis
- estructuras profundas, p. ej., puntos gatillo en cadera y glúteos

Urología:

- estructuras profundas, p. ej., puntos gatillo del suelo pélvico afectado por SDPC

Fuente terapéutica FBL10x5G2

★ Enfoque lineal con un gran volumen de tratamiento

EFD
MAX 0,160 mJ/mm²

↔ Profundidad de penetración / zona focal central

central 0 - 20 mm

5 MPa* 10 - 30 mm



El foco lineal es perpendicular a la fuente terapéutica



Indicado para:

Trastornos musculoesqueléticos:


- estructuras miofasciales superficiales amplias, p. ej., la banda iliotibial, la fascia toracolumbar

Urología:

- cobertura ampliada de los cuerpos cavernosos en el tratamiento de la disfunción eréctil

Dermatología:

- síndrome del pie diabético
- úlceras por presión
- celulitis



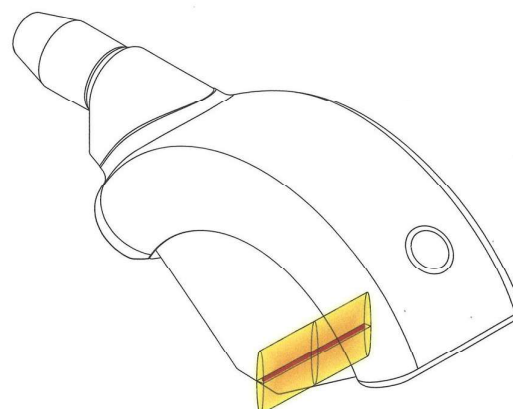


*Nivel de intensidad máx.

«Direct Focusing» con múltiples elementos piezocerámicos

Un método suave y
preciso para generar
ondas de choque

El PiezoWave^{2T} utiliza una tecnología eficiente de alto rendimiento para generar ondas de choque mediante Direct Focusing. El PiezoWave^{2T} no necesita lentes acústicas ni reflectores que limiten o atenúen los impulsos (v. fig. inferior). El impulso de presión generado por los elementos piezocerámicos atraviesa suavemente el tejido y solo forma una onda de choque en la zona focal, es decir, en el tejido diana. El tejido sano circundante no se ve afectado. Direct Focusing crea zonas focales precisas; la tecnología es silenciosa y genera distintas formas focales adaptadas a cada indicación.

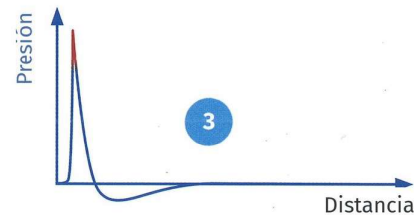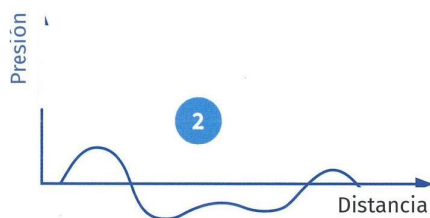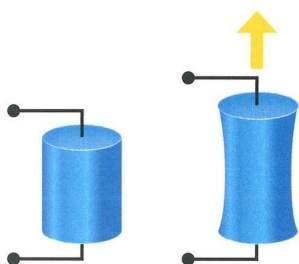


1
Impulso de presión
generado por el efecto
piezoeléctrico inverso


2
**Generación de una
onda de presión**

3
**Formación de una
onda de choque**


Profundidad máxima de penetración
en el punto focal central (3).

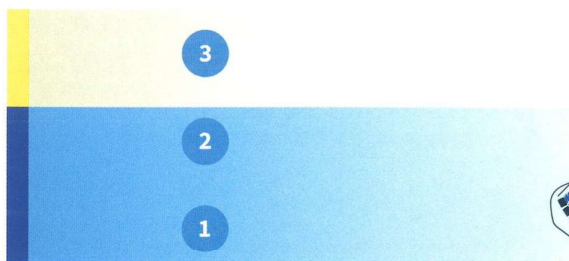

El tejido circundante
no se ve afectado (1, 2).

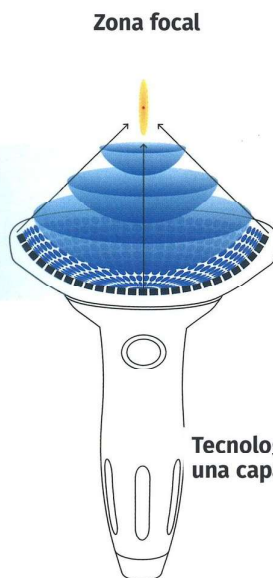

Tecnología de
una capa

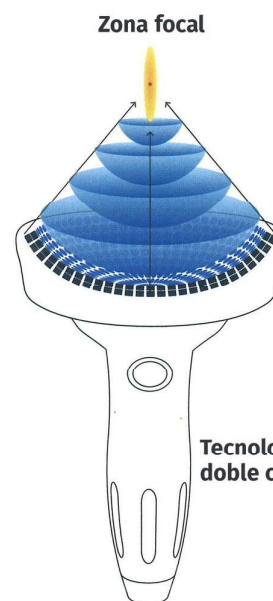


Tecnología de
doble capa

Las almohadillas de gel permiten una gradación delicada y precisa de la profundidad de penetración


Incrementos de 5 mm, 10 mm o 20 mm.

Las almohadillas de gel con gradación precisa permiten posicionar el punto focal con exactitud. El impulso de onda de choque se activa con el interruptor integrado en el mango o con el pedal opcional. El pedal también puede utilizarse para controlar la intensidad.

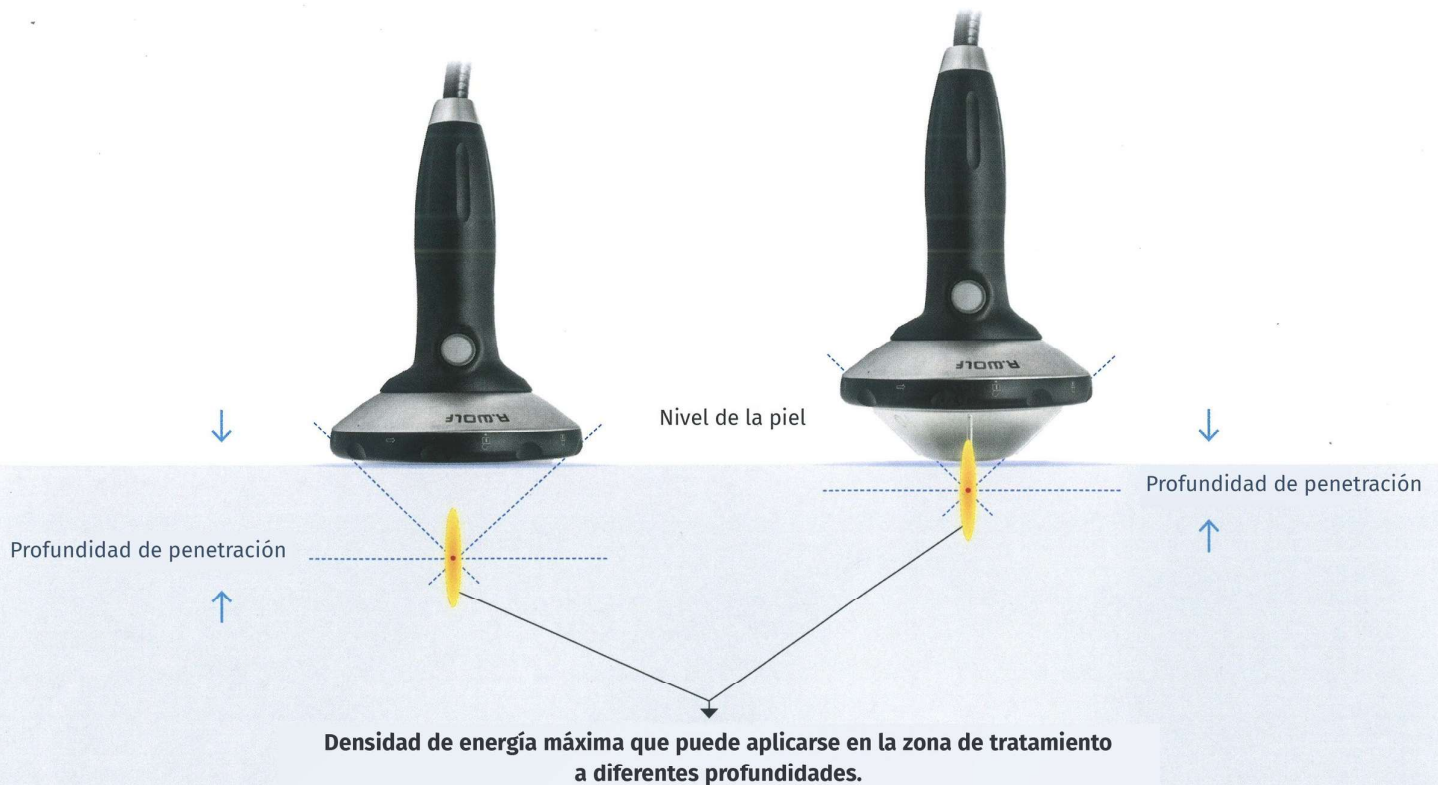


Generación convencional de ondas de choque: «Indirect Focusing»

Otras tecnologías utilizan el enfoque indirecto para generar ondas de choque. Los reflectores redirigen los campos acústicos, lo que puede provocar una posible pérdida de rendimiento.

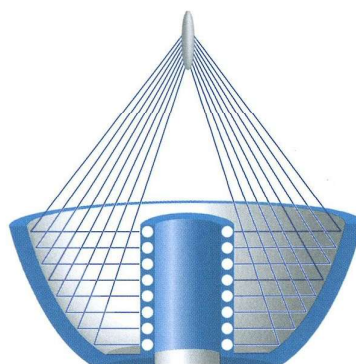

Onda de choque
electromagnética

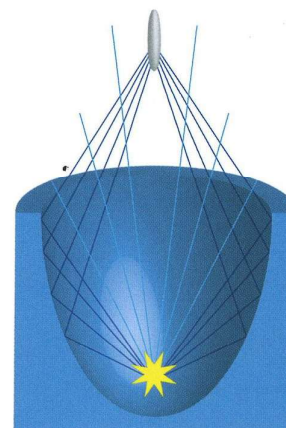


Onda de choque
electrohidráulica

PiezoWave^{2T}: Más de 40 años de experiencia piezo, 5 millones de impulsos garantizados

Desarrollado para el máximo nivel de precisión, construido para una vida útil que va más allá de las especificaciones de la garantía.



Richard Wolf GmbH y ELvation Medical GmbH: dos socios sólidos que trabajan juntos en su beneficio. La investigación, el desarrollo de aplicaciones y la producción se realizan exclusivamente en Alemania, con la máxima precisión y el mayor compromiso con la calidad. Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de equipos de ondas de choque piezoeléctricas, el PiezoWave^{2T} es un producto que destaca por su excepcional longevidad y fiabilidad, a menudo mucho más allá de los 5 millones de impulsos garantizados.

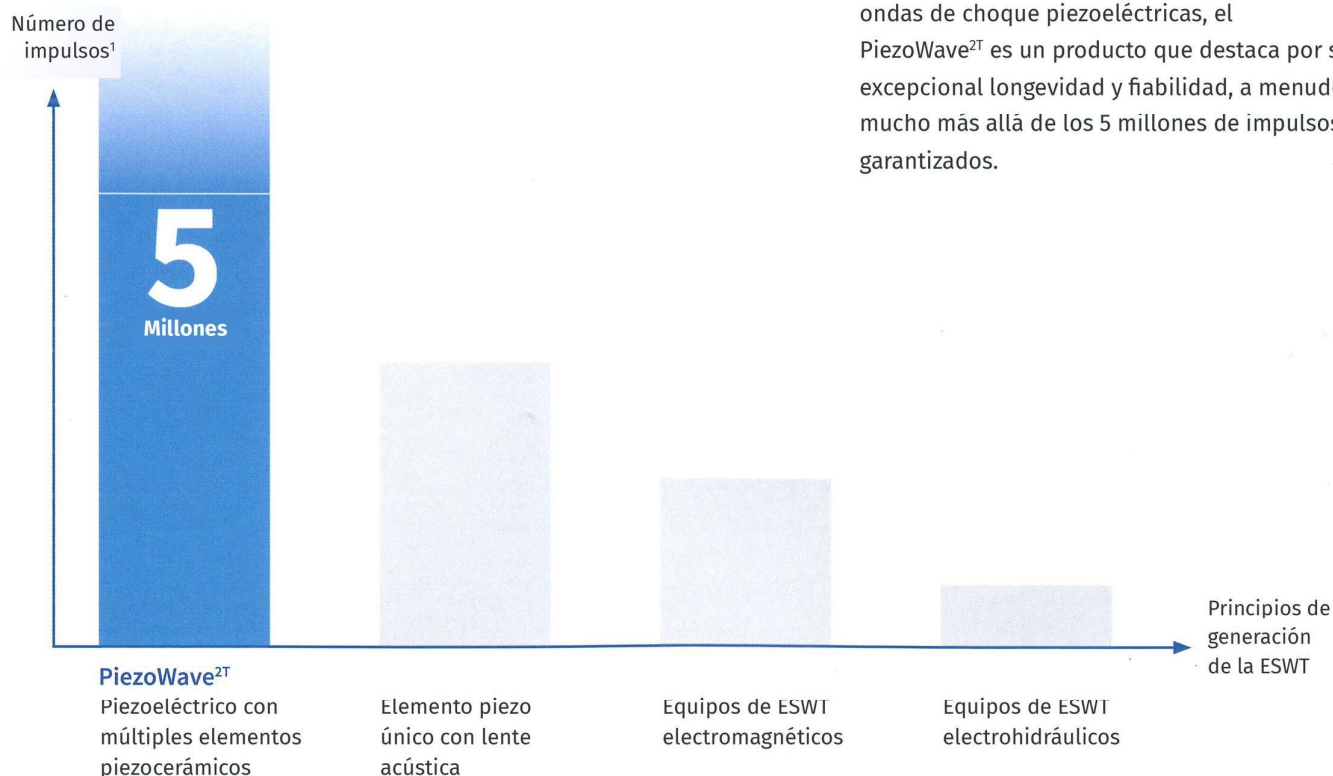

Relación frecuencia / densidad de flujo de energía estable

Las tecnologías de ESWT convencionales y anteriores reducen involuntariamente la frecuencia de las ondas de choque al usar intensidades altas, ya que sus capacidades técnicas son limitadas. En cambio, el generador de alta tensión de alto rendimiento del PiezoWave^{2T} garantiza una relación frecuencia/intensidad estable en un amplio rango. Esto amplía las posibilidades de la ESWT en aplicaciones dinámicas, es decir, cuando la fuente terapéutica

se desplaza sobre el tejido diana. Los pacientes pueden tratarse con frecuencias de hasta 12 hercios, incluso a altas intensidades, desplazando la fuente terapéutica de forma rápida y homogénea sobre estructuras anatómicas extensas. Siguiendo las directrices de la ISMST/DIGEST, en los niveles de intensidad más altos la frecuencia se limita a 8 Hz.

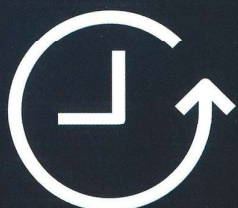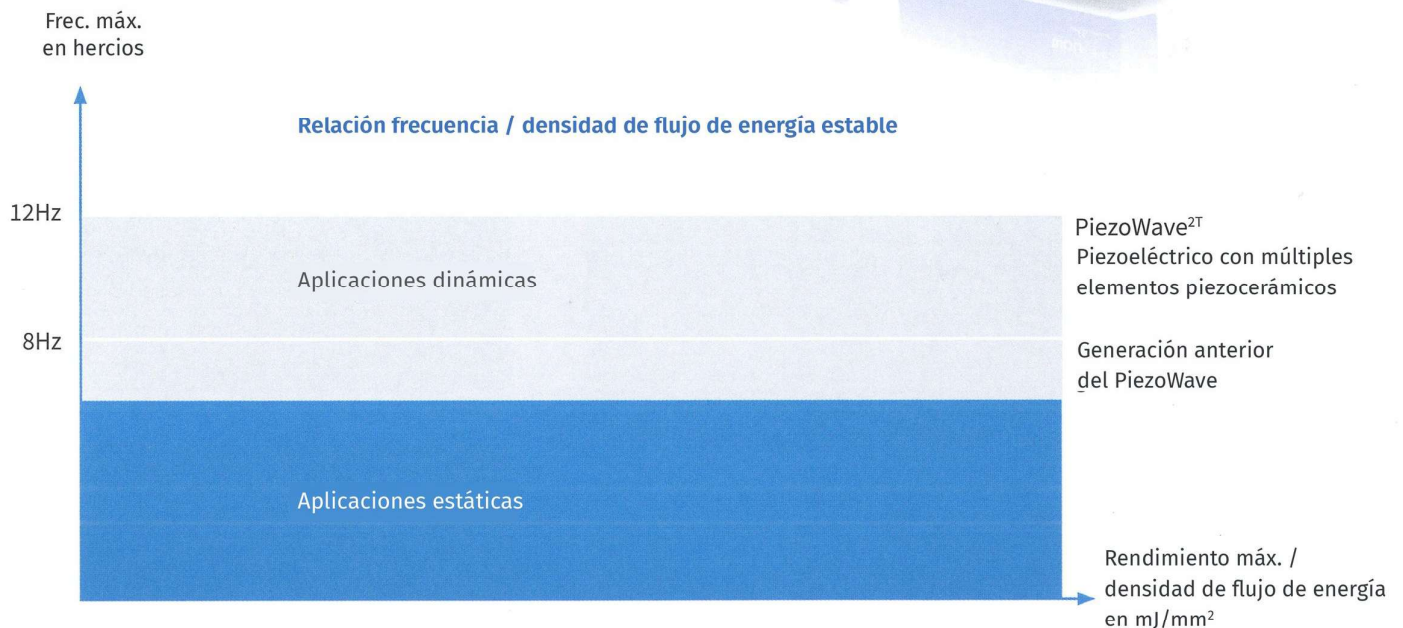

Mantenimiento excepcionalmente bajo

Con el PiezoWave^{2T} dispondrá de más tiempo para centrarse en lo esencial. Al no tener sistema de circulación de agua, no son necesarias tareas de mantenimiento asociadas como el vaciado y la purga periódicos, etc.


T-Mode

Un concepto de tratamiento excepcional, desarrollado y patentado por Richard Wolf GmbH.

En la literatura científica, la frecuencia de los estímulos extracorpóreos se considera relevante para la mecanotransducción, es decir, la conversión de estímulos mecánicos en señales bioquímicas. El uso dirigido de determinadas frecuencias permite aprovecharlas con fines terapéuticos.


T-BURST

El modo de frecuencia T-BURST consiste en paquetes de impulsos activados sucesivamente e interrumpidos por una breve pausa. La duración de los impulsos y las pausas, así como la frecuencia, están predeterminadas. El tejido diana experimenta una alternancia constante entre estímulos y reposo.

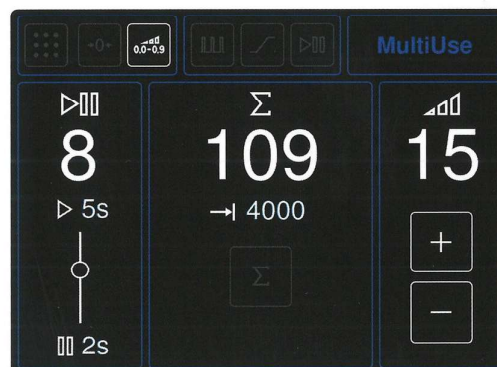

T-RAMP

El modo T-RAMP consiste en un aumento gradual de la frecuencia durante un periodo de tiempo definido. La frecuencia inicial, la frecuencia final y el tiempo durante el que aumenta la frecuencia están predefinidos. Las aplicaciones dinámicas se usan para tratar tendones, uniones miotendinosas y el vientre muscular.

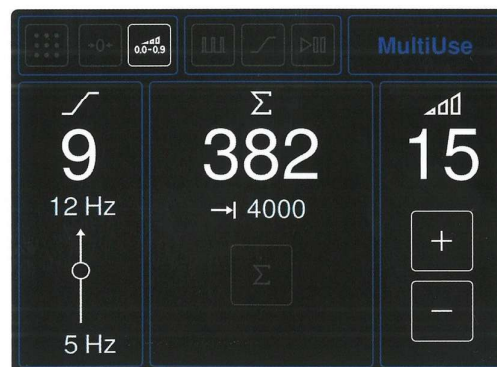

OPINIÓN EXPERTA/MODO

Este modo permite mostrar individualmente la densidad total de flujo de energía preajustada (mJ/mm²), la presión pico positiva preajustada (MPa) y el tiempo de tratamiento restante.





Elvation Hub

La plataforma central de información para su terapia de ondas de choque.

Nuestro Elvation Hub es una plataforma de información en línea en la que hemos reunido toda la información sobre aplicaciones actuales y experiencias de usuarios, y se la ofrecemos en forma de biblioteca digital.

Tiene acceso a vídeos de tratamiento, información sobre el uso del equipo, el posicionamiento del paciente y experiencias de usuarios. Nuestra biblioteca de webinars con datos de usuarios experimentados le aporta nuevas ideas para sus tratamientos. En nuestros folletos también puede consultar información de fondo, estudios científicos actuales, estudios de referencia y detalles sobre la tecnología.

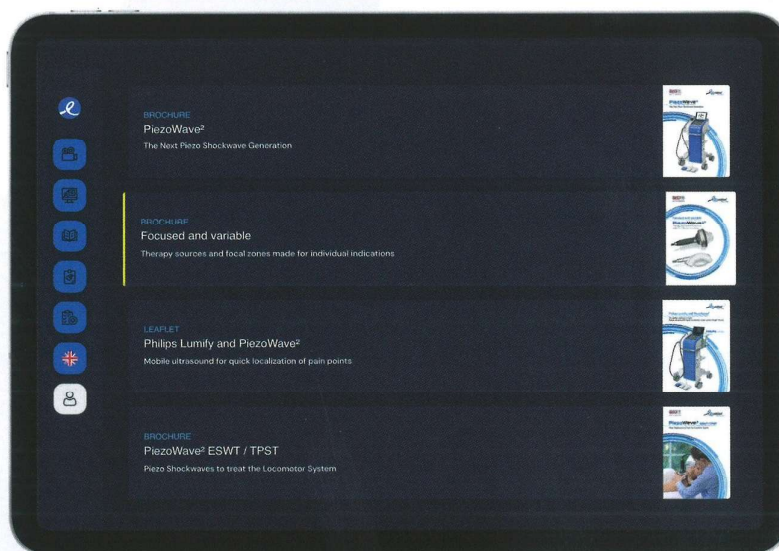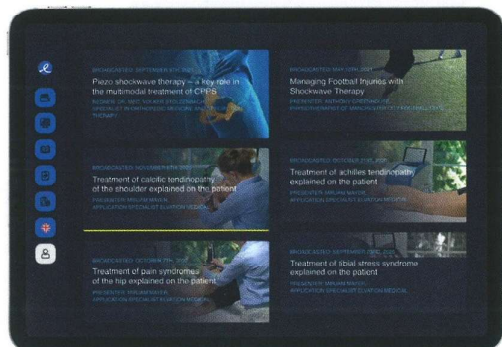

Los vídeos de tratamiento muestran los parámetros, las fuentes terapéuticas adecuadas y los puntos gatillo típicos.

ESWT en distintas especialidades médicas

Descubra soluciones de configuración que han demostrado ser eficaces en la práctica médica diaria.

Trastornos musculoesqueléticos

Desde la tendinitis calcificante del hombro hasta la pseudoartrosis y los puntos gatillo miofasciales: con la onda de choque piezo puede seleccionar el foco terapéutico adecuado para cada indicación, aumentando así las probabilidades de éxito terapéutico.




Áreas principales: Mano/hombro, pie/tobillo, Tendinopatías superficiales y puntos gatillo miofasciales Todoterreno para ortopedia	Fuente terapéutica ligera y manejable con foco preciso, ideal para localizar puntos de dolor	F7G3	0 - 30 mm	0.403 mJ/ mm ²	Basic 3
Tendinopatías, pseudoartrosis, puntos gatillo	Precisión y alto rendimiento para tratar las indicaciones clásicas de la ESWT	F10G4	05 - 40 mm	0.822 mJ/ mm ²	Basic 4
Áreas principales: Cadera, zona glútea y pélvica, puntos gatillo profundos y tendinopatías	Zona focal extremadamente alargada para tratar zonas profundas	F10G10	10 - 100 mm	0.323 mJ/ mm ²	Basic 10
Áreas principales: Estructuras miofasciales extensas superficiales, p. ej., tendón de Aquiles, fascia plantar, extensores/flexores del antebrazo, musculatura superficial de hombro y cuello	Foco lineal con una anchura focal de hasta 50 mm (zona de 5 MPa) para aplicaciones dinámicas a lo largo de la cadena cinética/tendón o de las fibras musculares	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/ mm ²	MultiUse 2
Áreas principales: Lesiones deportivas, tratamiento de estructuras miofasciales superficiales, tendinopatías, puntos gatillo	FBL10x5G2: foco lineal de hasta 50 mm de anchura (zona de 5 MPa) para aplicaciones dinámicas a lo largo de la cadena cinética/tendón o fibras musculares F10G4: tratamiento preciso y potente de las indicaciones convencionales de ESWT	FBL10x5G2 F10G4	0 - 20 mm 05 - 40 mm	0.160 mJ/ mm ² 0.822 mJ/ mm ²	MultiUse 2 / 4
Áreas principales: Tratamiento del dolor asociado a enfermedades articulares degenerativas, tratamiento conservador de fracturas Puntos gatillo profundos	Foco amplio y gran volumen focal, rendimiento excepcionalmente alto con una profundidad de penetración de hasta 60 mm (centro focal); ideal para tratar puntos gatillo profundos y pseudoartrosis	FB10G6	0 - 60 mm	0.702 mJ/ mm ²	MultiUse 6


					
Áreas principales: Lesiones deportivas y enfermedades degenerativas, estructuras miofasciales superficiales y profundas, tratamiento conservador de fracturas Grandes consultas, hospitales universitarios con numerosos departamentos que tratan el sistema musculoesquelético y locomotor Tratamiento miofascial superficial y profundo, enfermedades degenerativas de articulaciones y tendones, lesiones deportivas, tratamiento de síndromes de dolor, tratamiento conservador de fracturas, síndrome de dolor miofascial, tratamiento de puntos gatillo	FBL10x5G2: foco lineal de hasta 50 mm de anchura (zona de 5 MPa) para aplicaciones dinámicas a lo largo de la cadena cinética/tendón o fibras musculares	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	MultiUse 2 / 6
	FB10G6: foco amplio y gran volumen focal, rendimiento excepcionalmente alto con una profundidad de penetración de hasta 60 mm (centro focal); ideal para tratar puntos gatillo profundos y pseudoartrosis	FB10G6	0 - 60 mm	0.702 mJ/mm ²	
	FBL10x5G2: foco lineal de hasta 50 mm de anchura (zona de 5 MPa) para aplicaciones dinámicas a lo largo de la cadena cinética/tendón y fibras musculares	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	Unlimited
	F10G4: alto rendimiento preciso para tratar las indicaciones clásicas de ESWT	F10G4	5 - 40 mm	0.822 mJ/mm ²	
	FB10G6: foco amplio y gran volumen focal, rendimiento excepcionalmente alto con una profundidad de penetración de hasta 60 mm (centro focal); ideal para tratar puntos gatillo profundos y pseudoartrosis	FB10G6	0 - 60 mm	0.702 mJ/mm ²	
	F10G10: zona focal extremadamente alargada para tratar zonas profundas	F10G10	10 - 100 mm	0.323 mJ/mm ²	

Urología

Los enfoques terapéuticos con ESWT para tratar la disfunción eréctil vascular (DE), el síndrome de dolor pélvico crónico (SDPC) y la enfermedad de Peyronie (EP) han mostrado resultados prometedores. Con base en evidencia suficiente, la terapia de ondas de choque focalizadas de baja intensidad es una de las terapias de primera línea citadas en las guías de la EAU para el tratamiento de la DE vascular.

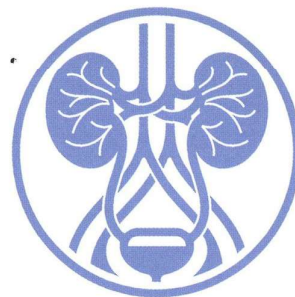


Disfunción eréctil vasculogénica	Foco lineal para aplicaciones dinámicas a lo largo de los cuerpos cavernosos	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	MultiUse 2
Disfunción eréctil vasculogénica	FBL10x5G2: foco lineal para aplicaciones dinámicas a lo largo de los cuerpos cavernosos	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	MultiUse 2 / 3
Enfermedad de Peyronie	F7G3: foco preciso para aplicaciones estáticas en el tratamiento de placas calcificadas	F7G3	0 - 30 mm	0.403 mJ/mm ²	
Disfunción eréctil vasculogénica	FBL10x5G2: foco lineal para aplicaciones dinámicas a lo largo de los cuerpos cavernosos	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	MultiUse 2 / 3 / 10
Enfermedad de Peyronie	F7G3: foco preciso para aplicaciones estáticas en el tratamiento de placas calcificadas	F7G3	0 - 30 mm	0.403 mJ/mm ²	
Síndrome de dolor pélvico crónico	F10G10: zona focal ampliada, ideal para tratar miogelosis y puntos gatillo en la estructura multicapa del suelo pélvico, incluida la próstata	F10G10	10 - 100 mm	0.323 mJ/mm ²	

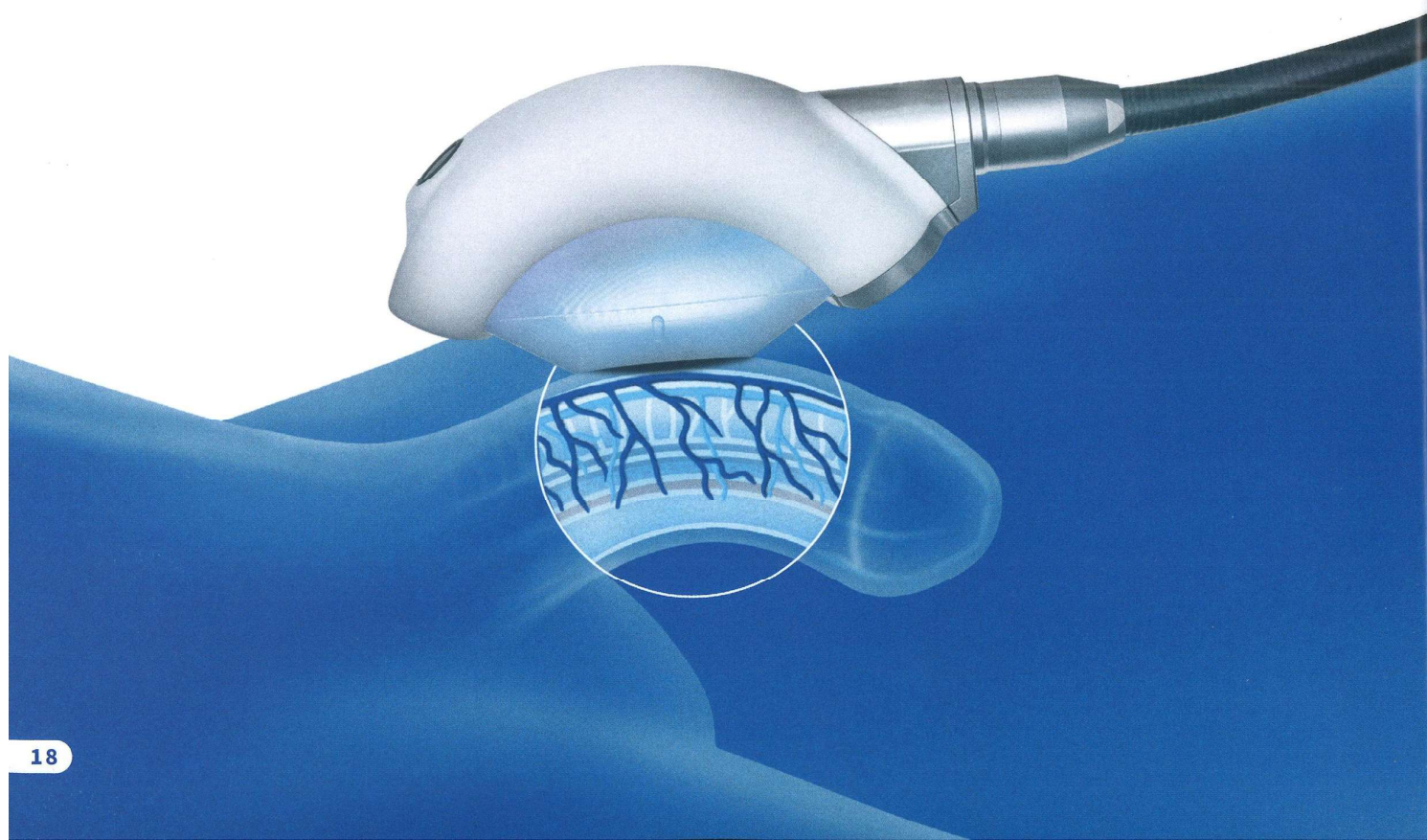

Dermatología

La ESWT es un método prometedor para iniciar la cicatrización de heridas, especialmente de heridas crónicas como las úlceras del pie diabético. Los estudios han demostrado que la ESWT puede favorecer la cicatrización y acelerar el proceso de curación.

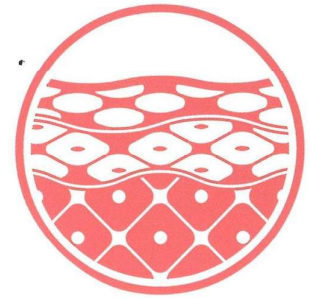

Cuidado de heridas crónicas: síndrome del pie diabético, úlceras por presión	Foco lineal con una anchura focal de hasta 50 mm (zona de 5 MPa) para aplicaciones dinámicas sobre la zona de tratamiento	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	MultiUse 2
Tratamiento estético: Celulitis	Foco lineal con una anchura focal de hasta 50 mm (zona de 5 MPa) para aplicaciones dinámicas sobre la zona de tratamiento	FBL10x5G2	0 - 20 mm	0.160 mJ/mm ²	MultiUse 2

Áreas de aplicación

Caract. focales (req.)

Fuente terapéutica

Prof. penetración (centro focal)

EFD MAX. EFD máx.

Serie de modelos



Benefíciense de nuestra experiencia

¿Tiene preguntas sobre ejemplos de configuración concretos?

Compartimos con gusto nuestros conocimientos.



Asesoramiento personal:

+49 (0) 7231 – 56 36 56

Use nuestro formulario de contacto o el chat en vivo:

www.elvation.de/kontakt/

PiezoWave^{2T}

Elvation[®]

Fabricado
por Richard Wolf,
distribuido por Elvation.



Síguenos en:



Elvation Medical GmbH

Ludwig-Wolf-Str. 6 · 75249 Kieselbronn / Alemania

+49 72 31 - 56 36 56 tel • +49 72 31 - 56 36 46 fax

info@elvation.de • www.elvation.com

© 2025 by Elvation Medical GmbH. Todos los derechos reservados. Este folleto se ha elaborado para la Unión Europea (región CE) y no es aplicable a EE. UU. El folleto puede incluir referencias a productos y servicios de Elvation Medical GmbH que (todavía) no están disponibles en determinados países. Estas referencias no significan ni garantizan que los productos o servicios en cuestión estén o vayan a estar disponibles en un país concreto. Póngase en contacto con nosotros si desea más información. Sujeto a cambios sin previo aviso; las imágenes pueden variar. El Tablet PC y los productos/componentes mostrados pueden ser opcionales o no estar incluidos en el suministro. Toda la información sobre la EFD se refiere a la densidad total de flujo de energía. Garantía de la fuente terapéutica de hasta 5 millones de impulsos de onda de choque dentro del período de garantía. Toda la información relativa a otras tecnologías puede variar según el fabricante.

T-Mode: patente de los Estados contratantes del CPE. El Elvation Hub está disponible en alemán e inglés y requiere conexión a internet. El sello de la página 2 es de diseño propio y no es una marca de certificación oficial.

1 Valores medios en el momento de la impresión; toda la información relativa a otras tecnologías puede variar según el fabricante.